

Renfert

making work easy

НОВЫЙ СОСТАВ И ЦВЕТ



Спрей Occlutec

НОВИНКА

Окклюзионный спрей



НОВИНКА Occlutec Spray

Окклюзионный спрей

Благодаря новым ярким цветам спрей Occlutec Spray обеспечивает особенно четкую и детальную маркировку контактов при изготовлении коронок, мостов и съемных протезов.

Преимущества

- Новые яркие цвета для оптимальной индикации контактных точек.
- Оптимальная дозировка благодаря напылению тонкого слоя из микропульверизатора.
- Однородное распыление независимо от уровня заполнения флакона.

Детали

- Оптимальный цвет.
- Значительно более экономичное использование.
- Спрей на 100 % смывается водой; никаких остатков.

Making work easy

Occlutec Spray с улучшенным составом красителя оптимизирован для аналоговых и цифровых зуботехнических технологий. Стремление к точности и чистоте в зуботехнической лаборатории сочетаются с высоким качеством и экономичностью. И результат типичен для Renfert: сделали работу проще («making work easy»).



НОВЫЙ состав и цвет


Как достичь наилучшего результата

Применение: Для полного использования эксплуатационных характеристик и высокого качества продукта, необходимо соблюдать два пункта:



Встряхнуть

Перед каждым использованием необходимо сильно встряхивать баллон в течение 60 секунд распылительной головкой вниз. Движение шара в баллоне должно быть хорошо слышно.


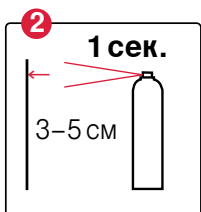


Наносить

Расстояние от распылительной головки до объекта должно составлять 3-5 см. Наносите спрей 1-секундным нажатием при легком движении.

Новые яркие цвета

Новый состав, новый цвет. Особенно яркие цвета создают оптимальную различаемость и облегчают идентификацию контактных точек.

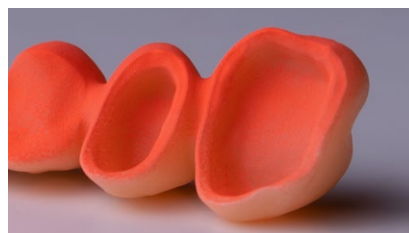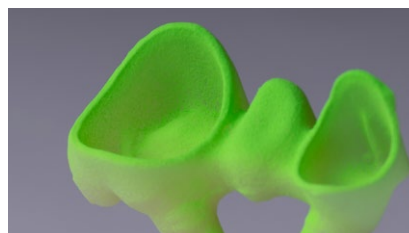

Информация для заказа

Occlutec Spray зеленый	75 мл № 19352000
Occlutec Spray красный	75 мл № 19353000