

Renfert

making work easy



MT premium

НОВИНКА Триммер для мокрой обработки

НОВИНКА MT premium

Мокрый триммер с рабочим светом и системой Aqua Stop

Обработка на новом уровне: продуманные функции упрощают ежедневное использование и делают MT premium триммером экстра-класса.

Преимущества

- Эффективная и точная мокрая шлифовка стоматологических гипсовых моделей.
- Работа без утомления благодаря встроенной подсветке рабочей зоны.
- Снижение затрат и экономия ресурсов благодаря режиму Aqua Stop.
- Быстрая регулировка угла наклона стола триммера с помощью удобного механизма наклона (90 °/ 98°).

Детали

- Простая, не требующая много времени очистка благодаря демонтажу столика триммера, дверцы и распылителя без использования инструментов.
- Чистая работа без помех за счет оптимальной герметизации.

Дополнительные детали

- Мотор с мощностью выше среднего уровня для эффективной обработки поверхности и более твердых типов гипса.
- Простое ведение гипсовых моделей с помощью угловых линий-насечек на столике триммера.
- Оптимальный обзор модели за счет угла наклона устройства 10°.
- Оптимально расположенная распылительная трубка предотвращает засорение диска триммера за счет равномерного увлажнения.



tool included



easy use



perfect view



Оптимальное освещение рабочей зоны

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение	220–240 В 100–120 В
Допустимая частота	50/60 Гц
Потребляемая (расходуемая) мощность	1300 Вт (230 В) 1325 Вт (120 В)
Мощность мотора (P1)	1300 Вт
Мощность мотора (P2)	900 Вт
Число оборотов	2880–3400 об/мин.
Расход воды максим.	7 л/мин
Давление воды миним. / максим.	1–5 бар
Ø (Штуцер для спускного шланга)	36 мм
Ø (дисков триммера)	234 мм
Габариты (ширина x высота x глубина)	305 x 330 x 410 мм
Вес (без диска)	~13,2 кг

Информация для заказа

MT premium вкл. диск Klettfix, 220-240 В	No. 18070000
MT premium вкл. диск Marathon, 220-240 В	No. 18070500
MT premium вкл. диск Klettfix, 100-120 В	No. 18071000
MT premium вкл. диск Marathon, 100-120 В	No. 18071500

НОВИНКА ORTHO guide

Монтажный комплект для ортодонтической оснастки MT premium или MT3



Комплект ORTHO guide преобразует MT Premium и MT3 в специальные триммеры для обработки ортодонтических моделей.

Преимущества

- Быстрая и точная, с ориентацией на прикус, обработка ортодонтических моделей с помощью интуитивно понятного шаблона и специального столика триммера.
- Повышенная точность и оптимальное позиционирование по средней линии благодаря направленному свету (только у MT premium).
- Точная обработка поверхности бугра на модели верхней челюсти.
- Изготовление точных трехмерных моделей с учетом всех плоскостей черепа.

Детали

- Благодаря особой концепции направляющих шаблон зафиксирован на устройстве непрочно, его можно снять легко и без инструмента.
- Простая, быстрая и без инструментов очистка всех компонентов.
- Пошаговая инструкция с эталонными моделями верхней и нижней челюсти (подходит и для документирования процесса).

Дополнительные детали

- Последующий монтаж не требует специального персонала и может быть легко выполнен самим пользователем.



Точная, ориентированная на прикус, обработка с помощью интуитивно понятного шаблона

Технические характеристики

Габариты (ширина x высота x глубина)	25 x 42 x 115 мм
Вес	~40 г
Класс лазера	1

Информация для заказа

ORTHO guide Set MT premium	No. 18070100
ORTHO guide Set MT3	No. 18080100

Больше триммеров

MT3

Триммер для мокрой обработки

вкл. диск Klettfix, 220-240 В
No. 18080000

вкл. диск Marathon, 220-240 В
No. 18080500

вкл. диск Klettfix, 100-120 В
No. 18081000

вкл. диск Marathon, 100-120 В
No. 18081500



MT plus

Триммер для мокрой и сухой обработки

вкл. диск Klettfix, 220-230 В
No. 18030000

вкл. диск Marathon, 220-230 В
No. 18030500



Диски триммера

Klettfix MT plus

Диск триммера из карбида кремния с 2 зернистостями



5 x Klettfix MT plus, (3 x 80 зернистость, 2 x 120 зернистость) + несущий диск
No. 18031000

Klettfix MT3/MT premium

Диск триммера из карбида кремния с 2 зернистостями



5 x Klettfix MT3/MT3 pro/MT premium, (3 x 80 зернистость, 2 x 120 зернистость) + несущий диск
No. 18031001

Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Дополнительная упаковка 80 зернистость



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18031100

Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Дополнительная упаковка 120 зернистость



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18031200

Marathon MT plus


Диск триммера с частичным алмазным покрытием



Marathon MT plus
No. 18032000

Marathon MT3/MT premium

Диск триммера с частичным алмазным покрытием

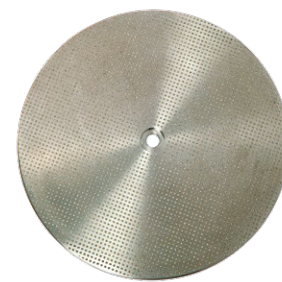

Marathon MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18032001

Infinity MT plus

Диск триммера с полным алмазным покрытием



Infinity MT plus
No. 18033000

Infinity MT3/MT premium

Диск триммера с полным алмазным покрытием



Infinity MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18033001